



# Just Do It's - LUP




<b>Título:</b>	Correcta operación del sistema NOELL.				
<b>Departamento / Área:</b>	<input type="checkbox"/> Producción	<input type="checkbox"/> Calidad	<input type="checkbox"/> CeDis	<input type="checkbox"/> HSE	<input type="checkbox"/> Otro: _____
	<input checked="" type="checkbox"/> Ingeniería	<input type="checkbox"/> Suministro	<input type="checkbox"/> T. Procesos	<input type="checkbox"/> S. Manufactura	
<b>Tipo de Mejora:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Aprendizajes	<input type="checkbox"/> Mejoras	<input type="checkbox"/> Otros _____		

**Objetivo:** Correcta operación y funcionamiento del sistema NOEL, en los carros bascula # 1 y 2 de Manufactura.


1.- Verificar en display del equipo MSC #1 ó MSC #2, que no tengamos alarmas presentes de lazos de seguridad abiertos. (ejemplo: alguna tapa de tamizador abierta ó paro de emergencia.)

En display debe estar en **auto**.  
Sin alarmas presentes (boton ACK con LED rojo encendido).  
Selector en auto Tambien.

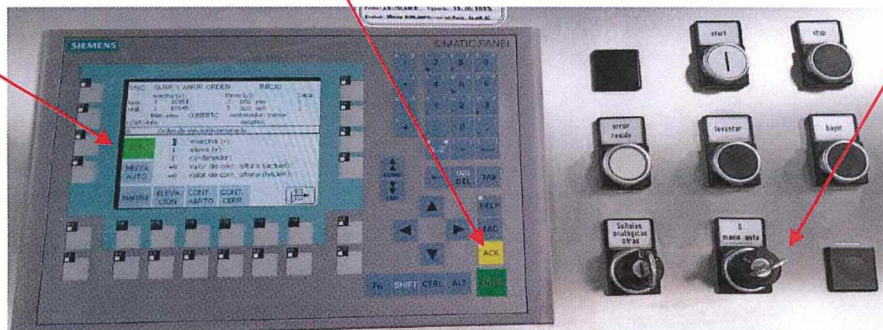

2-Verificar en los OP's de componentes mayores (1º piso, mezanine y 2º piso) No tengamos alarmas relacionadas en el lazo de seguridad ó las estaciones de dosificado en 2º piso y mezanine.

Vista general del OP sin alarmas presentes.

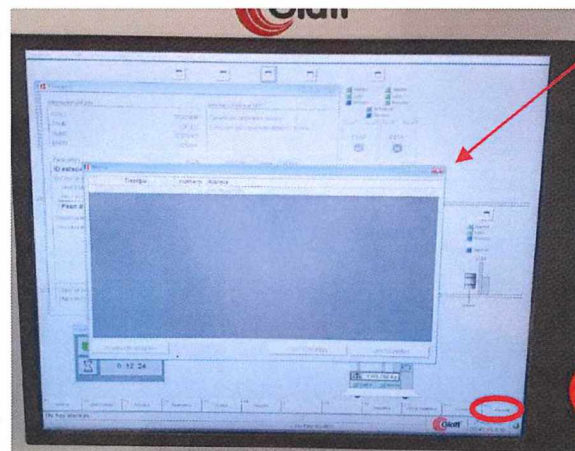

Ventana de Alarmas desplegada.  
(Sin alarmas, relacionadas a lazo de seguridad)

Boton: F12 Alarmas



Registro Entrenamiento	Fecha (dd.mm.aaaa)	21.09.23	21.09.23	21.09.23	21.09.23	21.09.23	21.09.23	21.09.23	21.09.23	21.09.23
	Enterado (firma farmacéutica)	L.A. Tampa	A. Corona	A. Alva	A. Solares	H. Hernandez	D. Montes	H. Salas	L. Luna	L. Flores
Registro Entrenamiento	Fecha (dd.mm.aaaa)	22.09.23	22.09.23	22.09.23	22.09.23	23.09.23	27.09.23			
	Enterado (firma farmacéutica)	M. Iniesta	M. A. G. G. G. G.	R. Martinez	C. Medina	G. Lopez	A. Alvarado	D. Suarez		
Elaborado por: O. Suarez		Fecha: 21.09.23		Autorizado por: E. MORALES		Fecha: 21.09.23				

**RESTRICTED**





# Just Do It's - LUP




Título:	Correcta operación del sistema NOELL.
Departamento / Área:	<input type="checkbox"/> Producción <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> CeDis <input type="checkbox"/> HSE <input type="checkbox"/> Otro: _____ <input checked="" type="checkbox"/> Ingeniería <input type="checkbox"/> Suministro <input type="checkbox"/> T. Procesos <input type="checkbox"/> S. Manufactura
Tipo de Mejora:	<input checked="" type="checkbox"/> Aprendizajes <input type="checkbox"/> Mejoras <input type="checkbox"/> Otros _____

4.- Para ver correcto funcionamiento del sistema NOELL dentro del gabinete principal, verificar que los siguientes LED's estén encendidos.

✓ AUTOPILOT V: Primeros 4 LED's encendidos color rojo

## MODO CORRECTO

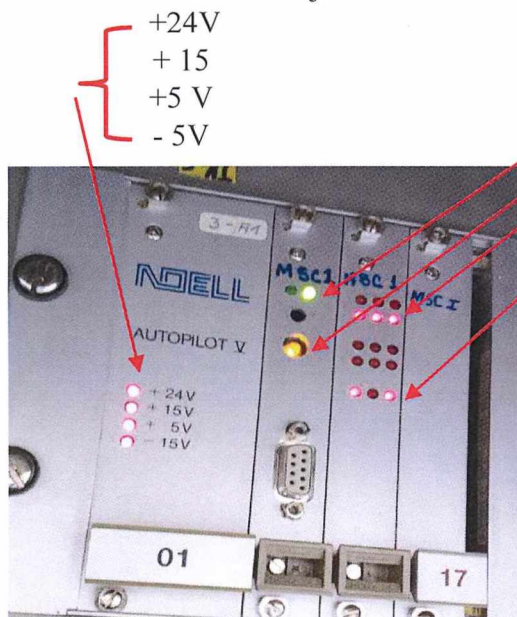

2° y 3° Tarjeta:

- ✓ 1° LED Verde
- ✓ 2° LED Naranja
- ✓ 3 LED's Rojos continuos
- ✓ 2 LED's encendidos ( on-off-on)



Boton debe permanecer adentro para estar accionado.

## MODO INCORRECTO



LED's encendidos si tenemos un lazo de seguridad abierto.

Registro Entrenamiento	Fecha (dd.mm.aaaa)									
	Enterado (firma farmacéutica)									
Registro Entrenamiento	Fecha (dd.mm.aaaa)									
	Enterado (firma farmacéutica)									

Elaborado por: O. SUAZO Fecha: 21.09.23 Autorizado por: E. MONGUIA Fecha: 21.09.23

RESTRICTED